

Codonics Litapappír


Með fleiri af læknisfræðilegum kerfum í dag með því að nota litaforrit, codonics leiðir iðnaður með chromavista^{okkar} lit pappír

"Við vinnum með taugafræðilegum hópi sem trylltist þegar þeir sáu hvernig rakvélina okkar-skarpir litafræðum á pappír

gæti verið rann þægilega inn í sjúklinga töflur. Það breytti bókstaflega starfi þeirra. "

John C. Litchney, MBA, RT, kerfisstjóri á Clevelandheilsugæslustöðinni, Department of Regional Radiology

- Codonics Exclusive Medical lit samsvörun (MCM™) tryggir framköllun passa mjúklega-afrita skjái
- Tilvalið til að vísa lækna og sjúklinga taka-heimili
- Sérstaklega hönnuð fyrir læknisfræðilegar umsóknir, Codonics Litur pappír er FDA samþykkt og fullkomlega Skjalasafn
- Myndgæði eru mun betri í Laser og Office prenturum lögum 16.700.000 litir
- Eina lita framleiðsla í iðnaði sem sannarlega keppinautum Hefðbundin litaljósmyndakvikmynd

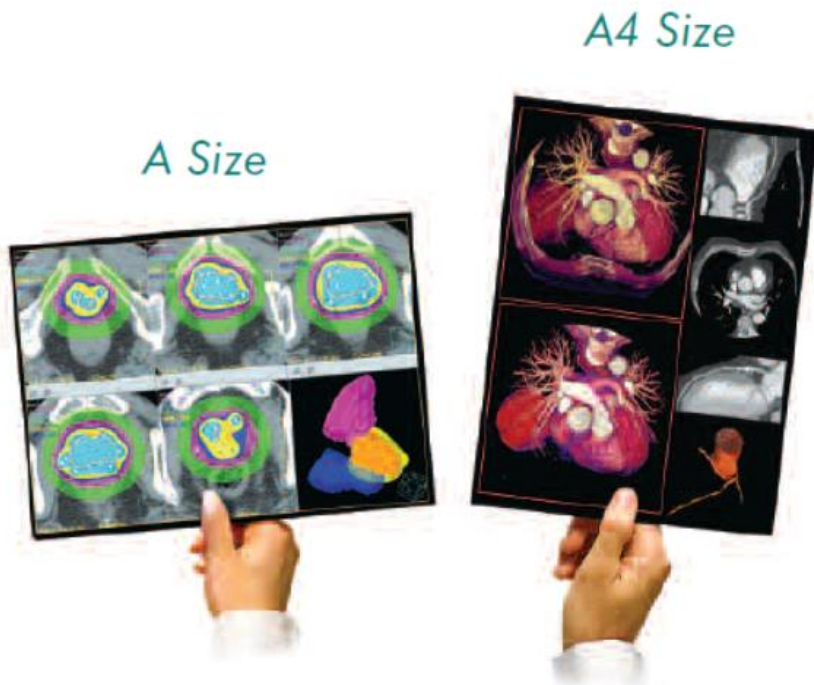


Codonics Chromavista®

Lita pappír

Codonics kynnti fyrsta DICOM lit heimsins imager og hefur verið brautryðandi fjölmiðla hugmyndavélar í rúman áratug. Við erum iðnaður leiðtogi í litaímyndamerkingar með yfir 25.000 uppsetningum um allan heim.

Sjóndeildarhringur okkar Multi-Media imager lögun töfrandi Edge-to-Edge lita prentun, hámarka myndgreiningu stærð og draga úr sóun. Codonics Exclusive Læknisfræðileg Litjöfnun (MCM™) er ítarleg myndvinnslueiginleiki sem leiðréttir prentaða Output litir til nákvæmlega passa mjúkur-afrita skjái. Þetta ferli Leiðréttur munur á Hue, metnun, og styrkleiki á milli prentara og mjúkritunar endurskoðunarstöðvar. Notandi getur auðveldlega ákvarðað besta samsvörun fyrir skjáinn sinn með því að nota sjálfvirka MCM bracketing lögun sem er byggð inn í hvert Codonics imager.

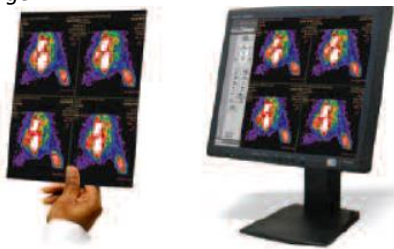

Litur prentar alltaf passa softcopy fylgist með einkarétt okkar Samsvörunarlitur í læknisfræði (MCM™). Samræmi, skýrleika og metnun með Codonics Color Dye-diffusion tækni langt umfram sem um vax eða bleksprautuprentara prentara.

Litrómasýn lita pappír er með þunga, photo-þyngd grunneiningar sem standast vatn og tálgað. Þar sem það er engin blek eða tónik, myndir aldrei smear eða flytja á höndum eða öðrum prenti.

Upplýsingar:

- Samhæft við sjóndeildarhring og NP/EP Multi-Media getur
- Samfelldur tónn litur flutningur
- $D_{min} < 0,10 OD$, $d_{max} > 2,500 OD$ hugsandi
- Þykkt $\sim 0,2$ mm

Fáanlegar stærðir:

Horizon

A (8,5 "x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Netfang info@codonics.com
www.codonics.com

Nánari upplýsingar hafa samband við Snyrtifræðinga á 800-444-1198 eða 440-243-1198 og biðja um Söludeild miðilsins okkar.

* Chromavista lita pappír er í boði til notkunar í flestum codonics hugmyndavélar, sumir líkan og stærðartakmarkanir gilda. Upplýsingar eru með fyrirvara um breytingar án fyrirvara. Hafðu samband við fulltrúa Codonics fyrir nýjustu upplýsingar. Höfundarréttur © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A