

Codonics fargepapir


Med flere av dagens medisinske systemer ved hjelp av fargeapplikasjoner, leder Codonics bransjen med vår ChromaVista® Color Paper

"Vi jobber med en nevrologgruppe som var begeistret da de så hvordan våre knivskarpe fargestudier på papir

kan slippes beleilig inn i pasientdiagrammer. Det forandret bokstavelig talt deres praksis."

John C. Litchney, MBA, RT, Administrator for Klinikken, ClevelandInstitutt for regional radiologi

- Kodonikk eksklusive medisinsk fargetilpasning (MCM™) sikrer utskrifter samsvarer med skjermer med myk kopi
- Ideell for å henvise leger og pasienttake-hjem
- Spesielt utviklet for medisinske anvendelser, Codonics fargepapir er FDA godkjent og fullt arkivering
- Bildekvaliteten er langt bedre enn laser- og kontorskrivere med 16,7 millioner farger
- Den eneste fargeproduksjonen i bransjen som virkelig rivaler konvensjonell farge fotografisk film

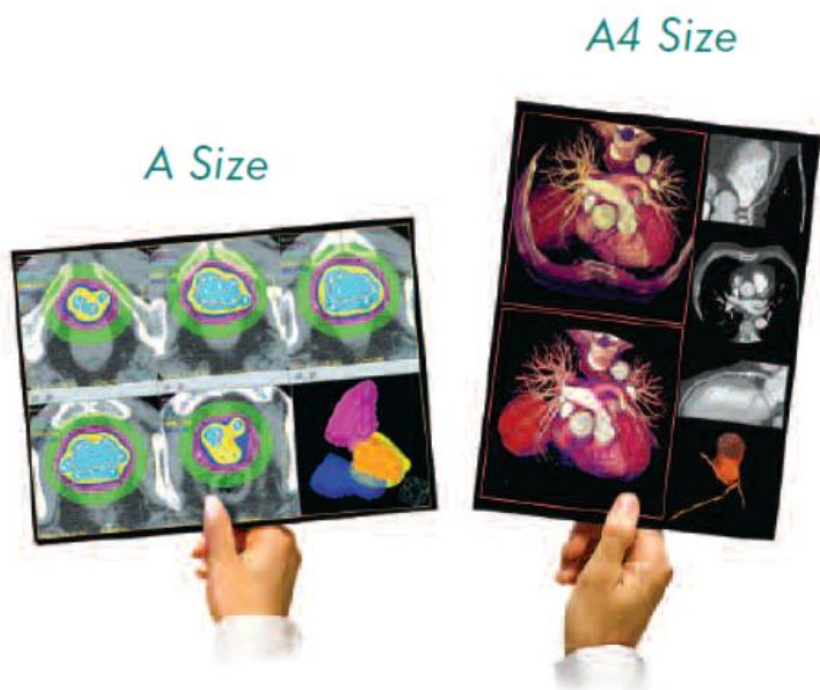


Codonics ChromaVista®

Farge Papir

Codonics introduserte verdens første DICOM-farge imager og har vært banebrytende multi-media imagers i over et tiår. Vi er bransjen leder i fargeimagers med over 25.000 installasjoner over hele verden.

Horizon-bildespilleren for flere medier har imponerende kant-til-kant fargeutskrift, maksimere bildebehandling størrelse og redusere avfall. Codonics eksklusive Medical Color Matching (MCM™) er en avansert bildebehandlingsfunksjonen som justerer utskrevne utgangsfarger for å samsvare nøyaktig med skjermer med myk kopi. Denne prosessen korrigerer forskjeller i fargetone, metning, og intensiteten mellom skriveren og soft-copy gjennomgang stasjoner. Brukerens kan enkelt bestemme den beste matchen for skjermen ved hjelp av den automatiske MCM-brakettfunksjon som er innebygd i alle Codonics imager.

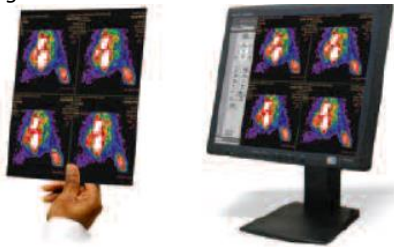

Fargeutskriften samsvarer alltid med softcopy-skjermer med våre eksklusive funksjonen Medical Color Matching (MCM™). Konsistens, klarhet og metning med Codonics fargefargestoffdiffusjonsteknologi langt overstiger voks- eller blekkskrivere.

ChromaVista Fargepapir har en tung, fotovektsmateriale som motstår vann og rive. Siden det ikke er blekk eller toner, sverter eller overfører bilder aldri til hender eller andre utskrifter.

Spesifikasjoner:

- Kompatibel med Horizon og NP/ EP multi-media imagers
- Kontinuerlig tonefargegjengivelse
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD
- Jeg har ikke noe å si.
- Tykkelse ~ 0,2 mm

Tilgjengelige størrelser:

Horisonten

A (8,5 " x 11 ")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Faks
E-post info@codonics.com
www.codonics.com

**For mer informasjon kontakt Codonics på
800-444-1198 eller 440-243-1198 og be om
vår mediesalgavdeling.**

* ChromaVista Color Paper er tilgjengelig for bruk i de fleste Codonics imagers, noen modell og størrelse restriksjoner gjelder. Spesifikasjonene er endres uten varsel. Kontakt codonics-representanten din for å få den nyeste informasjonen. Opphavsrett © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A