


Codonics färgpapper

Med mer av dagens medicinska system med färgapplikationer leder Codonics branschen med vår ChromaVista® Färgpapper

– Vi jobbar med en neurologigrupp som var glad när de såg hur våra knivskarpa färgstudier på papper kan delas bekvämt in i patientdiagram. Det ändrade bokstavligen deras praktik."

John C. Litchney, MBA, RT, administratör för Clevelandkliniken, Institutionen för regional radiologi

- Codonics exklusiva Medicinsk Färgmatchning (MCM™) säkerställer att utskrifter matchar mjukkopieringsmonitorer
- Idealisk för att hänvisa läkare och patiententa-hem
- Speciellt utformad för medicinska tillämpningar, Codonics färgpapper är FDA godkänd och helt arkiveringsbar
- Bildkvaliteten är vida överlägsen laser- och kontorskrivare med 16,7 miljoner färger
- Den enda färgproduktionen i branschen som verkligen konkurrerar konventionell färg fotografisk film

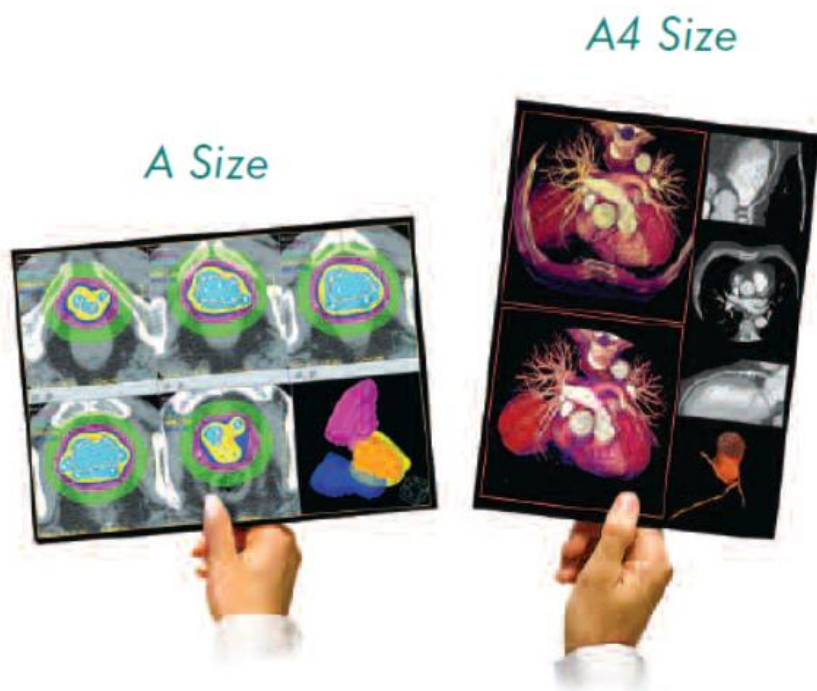


Codonics ChromaVista®

Färgpapper

Codonics introducerade världens första DICOM färg imager och har varit banbrytande multi-media avbildare i över ett decennium. Vi är branschen ledare i färgbilder med över 25 000 installationer över hela världen.

Vår Horizon Multi-media Imager har fantastisk färgutskrift från kant till kant, maximera bildavbildning storlek och minska avfallet. Codonics exklusiva Medicinsk färgmatchning (MCM™) är en avancerad bildbehandlingsfunktion som justerar utskrivna utdatafärger för att exakt matcha mjukkopieringsskärmar. Denna process korrigerar skillnader i nyans, mättnad, och intensitet mellan skrivaren och mjukkopia översynstationer. Användarens kan enkelt avgöra den bästa matchningen för deras skärm med hjälp av den automatiska MCM-gafflingsfunktion som är inbyggd i varje Codonics bildare.

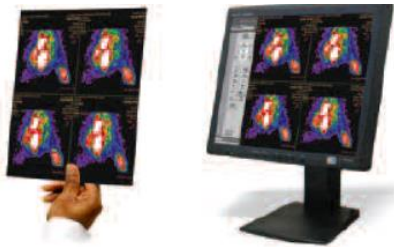

Färgutskrifter matchar alltid mjukkopieringsmonitorerna med våra exklusiva Funktionen Medicinsk färgmatchning (MCM™). Konsekvens, tydlighet och mättnad med Codonics färgfärgämne-diffusion teknik vida överstiger vax- eller bläckstråleskrivare.

ChromaVista Färgpapper har en tung, bildvikt basmaterial som motstår vatten och riva. Eftersom det inte finns något bläck eller toner, bilder aldrig smeta ut eller överföra på händer eller andra utskrifter.

Specifikationer:

- Kompatibel med Horizon och NP / EP multi-media bildare
- Kontinuerlig tonåtergivning
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2.500 OD
- Jag vet inte vad du ska göra.
- Tjocklek ~ 0,2 mm

Tillgängliga storlekar:

Horisonten

A (8,5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
E-post info@codonics.com
www.codonics.com

**För mer information kontakta Codonics på
800-444-1198 eller 440-243-1198 och be om
vår mediaförsäljningsavdelning.**

* ChromaVista Färgpapper är tillgänglig för användning i de flesta Codonics avbildare, vissa modell och storlek begränsningar gäller. Specifikationerna är ändras utan föregående meddelande. Kontakta din Codonics representant för den senaste informationen. Upphovsrätt © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A