

*Codonics DirectVista® filmas užtikrina aukščiausios kokybės vaizdus į sąnaudų taupymo masyvas dydžių*

# Codonics filmas

*"Kokybė yra pranašesnė už tradicinius filmų vaizdo vaizdus mes anksčiau naudojome."*

**A. Joseph Borelli, MD, MRT belfair -Bluffton, SC**

- Visiškai skaitmeninis, mūsų unikalus tiesioginis terminis technologija pasiekia vaizdo kokybę geriau arba lygus "lazerio kokybei"
- Patogus sausas spausdinimas pašalina vandentiekio poreikį, specialūs vėdinimo ir sėdimo reikalavimai
- 14 col. x 36" ir 14 col. x 51" ilgio filmas skaitmeniniu parašu true-size images on one continuous film tiesa dydžio vaizdus į vieną nepertraukiamo filmo
- Keli filmų dydžiai leidžia sumažinti filmų išlaidas spausdinant apie ekonomiškiausių jūsų paraiškos dydį

**8"x10"**

20 x 25 cm

**14 col. x17"**

35 x 43 cm

**14 col. x 51 col.**

35 x 130 cm

**14 col. x 36 col.**

35 x 92 cm

**11 col. x14"**

28 x 35 cm



## Codonics

## DirectVista® diagnostika

## Mėlyna ir aiški plėvelė


*Codonics patentuota vaizdo gavimo technologija išveda superior diagnostinė sausa plėvelė su neprilygstama vaizdo kokybe.*

*Mūsų filmas yra idealus sprendimas reikliausių medicinines spausdintinės kopijos taikomąsias programas. Visiškai pašalinti tarp linijų, pasiekiant filmą sklandžiai diagnostinis išėjimas yra tikslus ir nuoseklus.*

*Mūsų filmas yra 14"x 17", 11"x14" ir 8"x 10",*

suteikiant vartotojui galimybę keisti vaizdą į tinkamo dydžio plėvelės dydį, suteikiant alternatyvą spausdinti mažesnėmis sąnaudomis. Be to, mūsų išskirtinis 14"x 36" ir 14 col. x 51" ilgą filmą teikia specializuotus ortopedinius "skaitmeniniu susiuvami" tikrojo dydžio vaizdai ilgam kaului skoliozės tyrimus su viena išsistine plėvele. Priklauso nuo codonikai teikti patikimą, nuoseklią vaizdus, kurių kokybė yra aukščiausios kokybės.

Tūkstančiais vienas kito palyginimų, lenta sertifikuoti radiologai negalėjo pasakyti skirtumo tarp vaizdų, išspausdintų "Codonics" vaizdo iš tų, kurie spausdinami brangesnilazerio vaizdo. Patentuota kodonikai vaizdo gavimo technologija išveda diagnostinę plėvelę, kuri pasiekia neprilygstamą universalumą ir vaizdo kokybę.

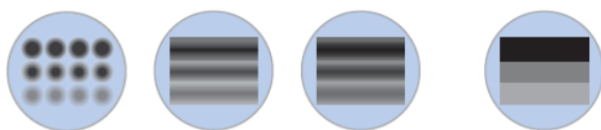


Tradicioniai terminiai pigių lazeriniai

brangioji lazeriniai codonics "No Pixel"

Spragos = artefaktu spragos =Arfacts No Gaps

No Gaps Dynamic Media Transport System (DMTS)

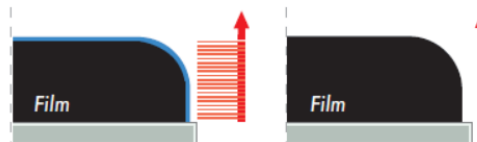

Llows Codonics imagers spausdinti, o žiniasklaida avansai sklandžiai judesio panaikinant erdvę tarp linijų.

### Specifikacijos:

- Suderinamas su programa "Horizontas" ir NP/ EP daugialypės terpės vaizdo
- Nuolatinis toninis pustonių atvaizdavimas
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 3.00 OD (transmissive) (transmissive) (Transmissive) (Trans)
- Storis ~ 0.2mm

### Galimi dydžiai:

#### Horizon Imagers

14"x 51" ( 35 X 130 cm)

14"x 36" ( 35 x 92 cm)

14"x17" ( 35 X 43 cm)

11"x14" ( 28 X 35 cm)

8"x10" ( 20 X 25 cm)

#### NP/EP vaizdo įrašai

8"x10" ( 20 X 25 cm)

11"x14"

8"x10"

17991 Englewood Drive 17991 Englewood Drive 17991 Englewood Drive 17

Middleburg Heights, OH 44130 Jungtinės Amerikos Valstijos

(440) 243-1198

(440) 243-1334 Faksas

Siųsti info@codonics.com

www.codonics.com

900-309-001 Rev C

**Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Codonics adresu 800-444-1198 arba 440-243-1198 ir paprašykite mūsų Žiniasklaidos pardavimų departamentas.**

Dėl modelio konfigūracijų ir medijos pasiekiamumo kreipkitės į savo "Codonics" atstovą. DirectVista Filmas yra skirtas naudoti daugelyje Codonics imagers, taikomi kai kurie modelio ir dydžio apribojimai. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Norėdami gauti naujausią informaciją, kreipkitės į savo Codonics atstovą. Autorinės teisės © 2005–2006 m. Codonics, Inc.